

Компания ДеалМед
www.dealmed.ru
info@dealmed.ru
+7 (495) 545 4140

иглы хирургические



В течение 50 лет Медикор Медитю Кфт Венгрия является производителем хирургических игл.

При производстве мы гарантируем высочайшее качество продукции, учитывая потребности наших клиентов. Основной принцип успеха нашей компании состоит в многолетнем опыте производства и использовании новейших технологий. Иглы производятся из стали высочайшего качества, не нарушая экологии окружающей среды.

Мы экспортируем наши иглы в более чем 40 стран, находящихся во всех частях мира.

Система менеджмента и качества, которую мы применяем для развития производства и реализации, отвечает стандартам DIN EN ISO 13485:2003, EU Directive 93/42.



Хирургические иглы, представленные в каталоге, как с непружинящим, так и с пружинящим ушком, электрополированы и изготовлены из современного коррозионностойкого материала. Их гибкость, прочность, долговечность колющей и режущей частей, а так же их коррозионностойкость соответствуют всем требованиям использования и хранения. Твердость игл соответствует HV 5200-6200 N/mm².

Иглы упаковываются в герметичные пластиковые пакетики, что дает возможность хранить их без риска образования коррозии или других повреждений. Даже после неоднократной стерилизации иглы не ржавеют и сохраняют блеск.

Все вышеперечисленные преимущества на практике достигаются только при бережном обращении и надлежащем использовании игл.

Для сохранения гибкости и долговечности избегайте перегрева игл.


Для более эффективной стерилизации и достижения антипирогенности рекомендуется тщательно обрабатывать иглы в стерильных условиях чистым спиртом.

Недопустимо использование нити в диаметре превышающей диаметр иглы, так как это повышает риск разрушения ушка иглы, а так же оставит излишне широкий и рваный шовный канал на сшиваемой ране.






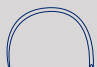

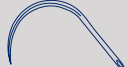
Справочная таблица по иглам хирургическим		
Тип острия	Описание	Область применения
Колющая	Тело иглы круглое, уплощенное в середине для лучшего захвата в иглодержателе. Коническое, очень гладкое острие иглы облегчает проникновение.	Используют преимущественно при работе с внутренними органами. Применяются для наложения анастомозов, при сечении мягких однородных тканей (мышц, фасций, слизистых оболочек и т.п.).
Режущая	Треугольное сечение на всем протяжении с режущей кромкой внутреннего направления. За счет третьей режущей кромки игла приобретает повышенную прочность в области острия и легче прокалывает твердые ткани.	Для сшивания плотных тканей, кожи
Обратно-режущая	Треугольное сечение на всем протяжении с наружной режущей кромкой. За счет третьей режущей кромки иглы приобретают повышенную прочность в области острия и легче прокалывает твердые ткани. Более предпочтительны для узловатого шва, испытывающего постоянное натяжение. За счет того, что гладкое основание иглы обращено к ране, при затягивании шва меньше шансов его прорезать.	Для сшивания плотных тканей, кожи
С режущим наконечником «троакар»	Игла круглая в сечении с режущим наконечником. Режущий наконечник получают путем обточки конусного острия иглы. За счет уменьшения канала, образуемого в тканях, по сравнению с режущей и глой такая форма иглы позволяет значительно снизить травматизацию тканей.	Для твердых тканей (апоневроз, сосуд с кальцификатами и т.п.). Уменьшение канала, образуемого в тканях, по сравнению с режущей иглой.

* Иллюстрации в каталоге отображают размер игл в натуральную величину.

Тип ушка

пружинящее
четные номера


Вид игл

прямые	полуизогнутые	2/8 окружности	3/8 окружности
			
полукруглые	5/8 окружности	S-образной формы	крючок
			

Тип острия (профиль)

обратно-режущее	круглое	троакар	режущее
			

Пример

Тип и размер игл заказываются из каталога, согласно следующего примера:

В 502	11	—
Тип иглы	Размер	Нестерильная

Иглы хирургические для сшивания кожи, мышц, сухожилий


G / GR / GT полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
G 504		
GR 514		
GT 516		


B / BR / BT изогнутые 3/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
B 502		
BR 510		
BT 512		
B 002		


G / GR / GT

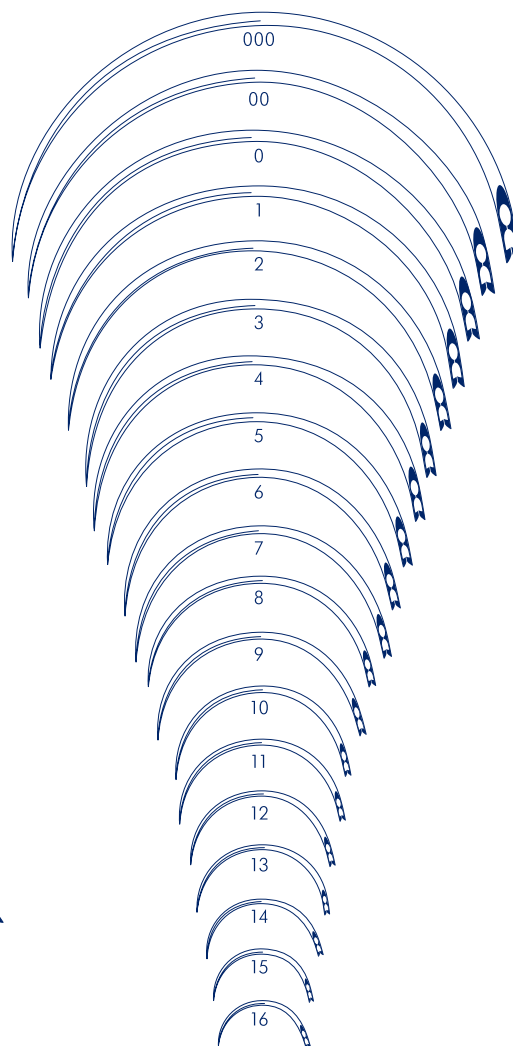

B / BR / BT

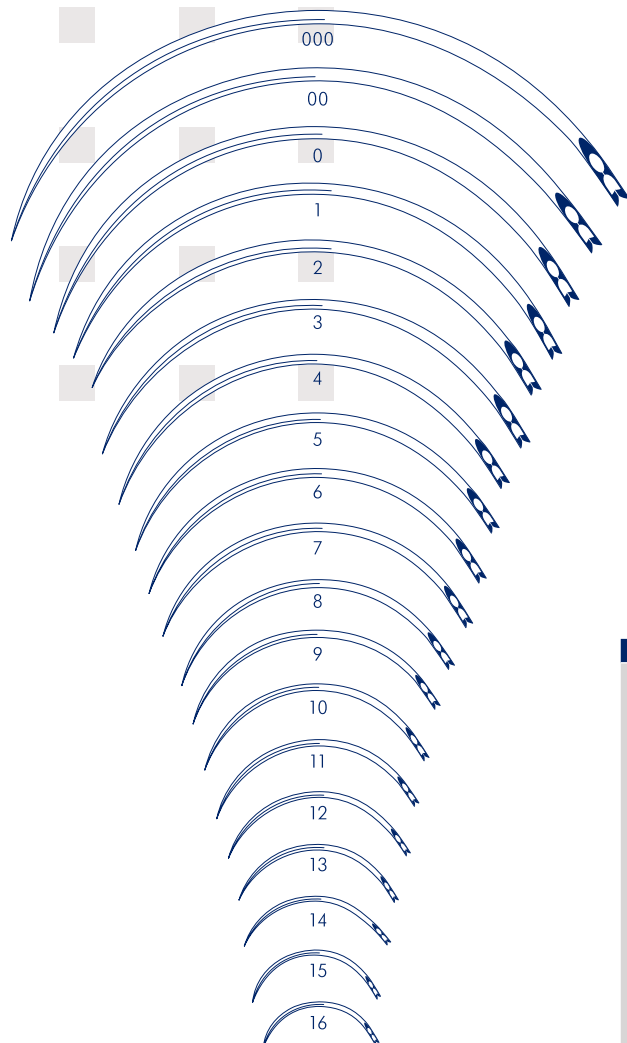

B 002

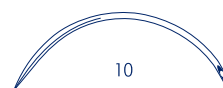

* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина	
B	000	1,80	100	
	BR	00	1,60	92
		0	1,60	85
	G	1	1,40	80
		2	1,40	75
	GR	3	1,30	70
		4	1,30	65
	GT	5	1,20	60
		6	1,20	55
	B 002	7	1,10	50
		8	1,00	45
		9	1,00	40
		10	0,90	36
		11	0,80	32
		12	0,80	28
		13	0,70	25
14		0,70	22	
15		0,60	20	
16		0,60	18	

Иглы хирургические для сшивания кожи, мышц, сухожилий

GA / GAR / GAT полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
GA 508		
GAR 498		
GAT 500		
G 002		

Ha полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
Ha 572		



E / ET полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
E 530		
ET 528		


K / KR прямые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
K 518		
KR 418		

GA / GAR / GAT

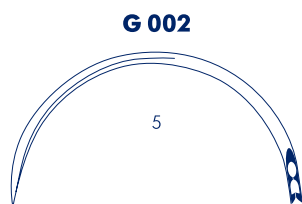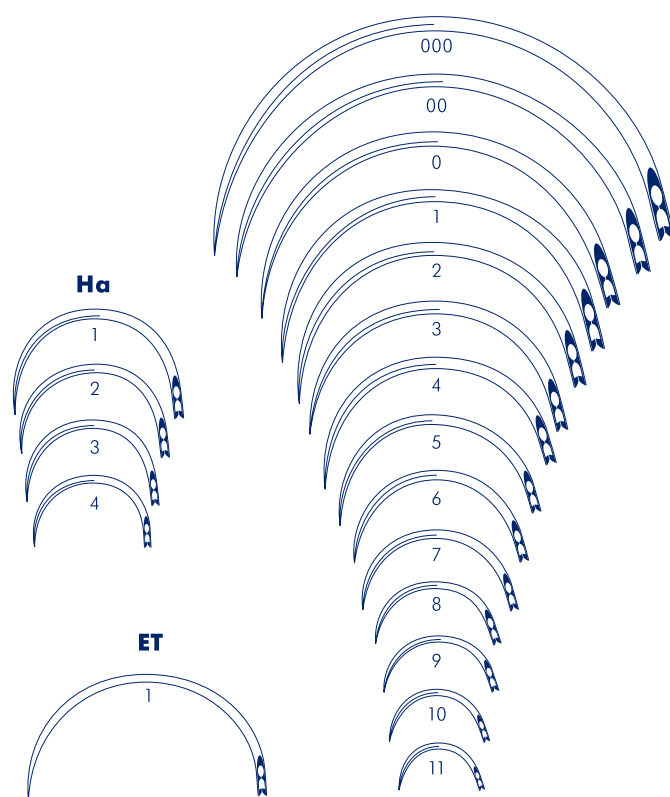

K / KR

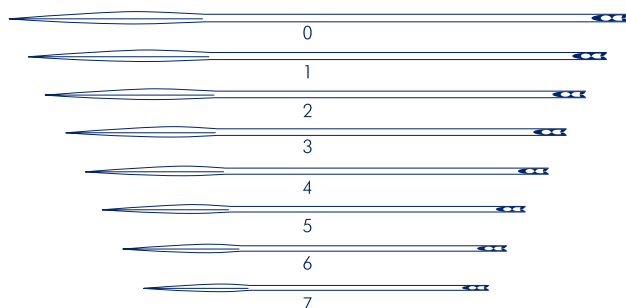


* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина	
GA	000	2,00	90	
	GAR	00	1,80	80
		0	1,80	70
		1	1,60	60
		2	1,60	55
		3	1,50	50
		4	1,40	45
		5	1,30	40
		6	1,20	35
		7	1,10	30
		8	1,00	25
		9	0,90	22
10	0,80	19		
11	0,80	16		
Ha	1	1,40	45	
	2	1,30	40	
	3	1,20	35	
	4	1,10	30	
ET	1	1,00	47	
	0	1,00	80	
K	1	0,90	75	
	2	0,90	70	
	3	0,90	65	
	4	0,80	60	
	5	0,80	55	
	6	0,80	50	
	7	0,70	45	
KR	1	0,90	75	
G 002	5	1,80	60	

Иглы хирургические для сшивания кожи, мышц, сухожилий

A / AR

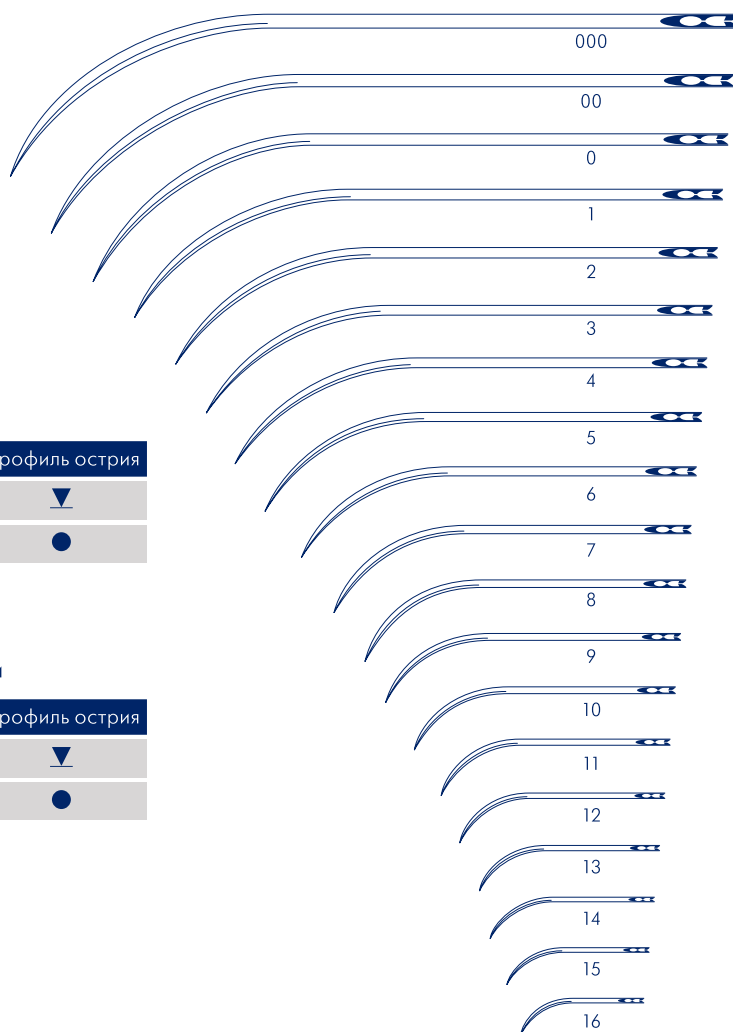


A / AR полуизогнутые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
A 506		
AR 496		

H / HR изогнутые 5/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
H 522		
HR 422		

H / HR

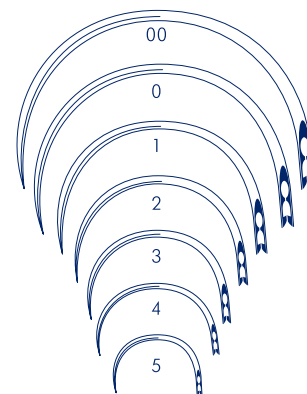

* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
A AR	000	1,80	100
	00	1,60	92
	0	1,60	85
	1	1,40	80
	2	1,40	75
	3	1,30	70
	4	1,30	65
	5	1,20	60
	6	1,20	55
	7	1,10	50
	8	1,00	45
	9	1,00	40
	10	0,90	36
	11	0,80	32
	12	0,80	28
	13	0,70	25
	14	0,70	22
15	0,60	20	
16	0,60	18	
H HR	00	1,40	75
	0	1,20	60
	1	1,10	52
	2	1,00	45
	3	0,90	38
	4	0,80	30
5	0,70	22	

Иглы хирургические для сшивания кожи, мышц, сухожилий

BE / BER изогнутые 3/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острья
BE 560		
BER 562		

GE / GER полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острья
GE 548		
GER 566		

Fn полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острья
Fn 546		

M / MT

полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острья
Mayo 542		
MayoT 442		


* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
BE	7	1,10	52
	9	1,00	47
GE	12	0,90	38
	14	0,80	34
GER	16	0,80	30
	19	0,70	23
	1	1,40	74
Fn	2	1,30	63
	3	1,40	42
M			
MT			


Номенклатура	Ушко	Профиль острья
KG-526		

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
KG	1	1,20	55
	2	1,10	50
	3	1,00	45
	4	1,00	40
	5	0,90	36
	6	0,80	34
	7	0,80	32
	8	0,80	30
	9	0,80	26
	10	0,70	23
	11	0,60	20
	12	0,60	18


GE / GER

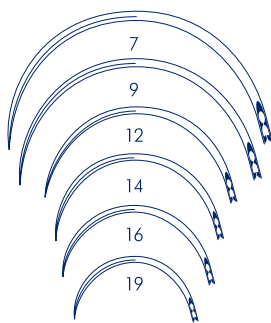


BE / BER

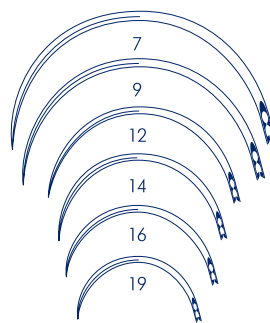


M / MT

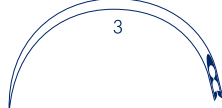

Fn

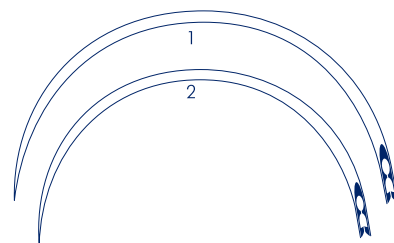

KG

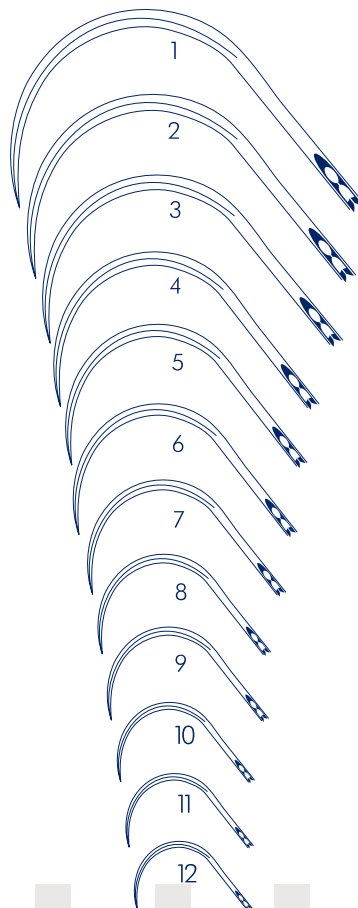

Иглы хирургические для кишечного шва и обшивания

PD изогнутые 3/8 окружности



Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PD 534		

PB полукруглые 1/2 окружности


Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PB 538		
PB 002		

PC прямые


Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PC 536		

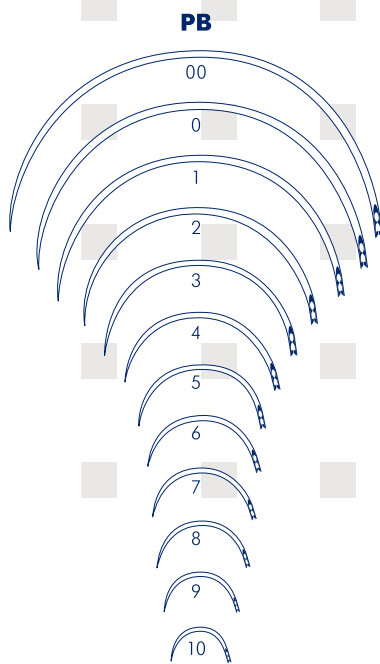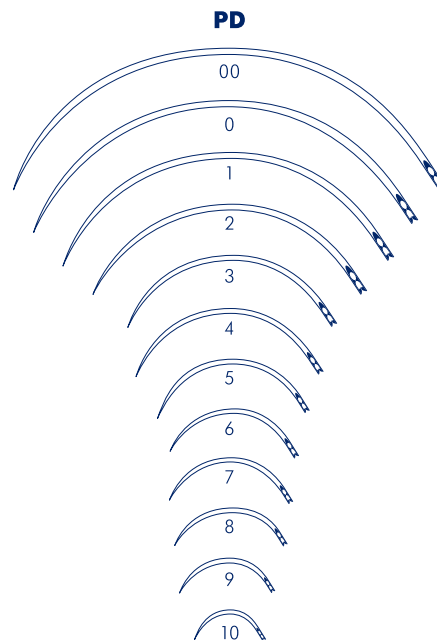


PB 001

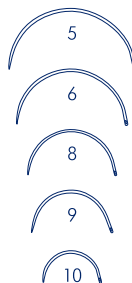

PB 002

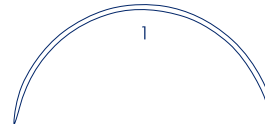

PC

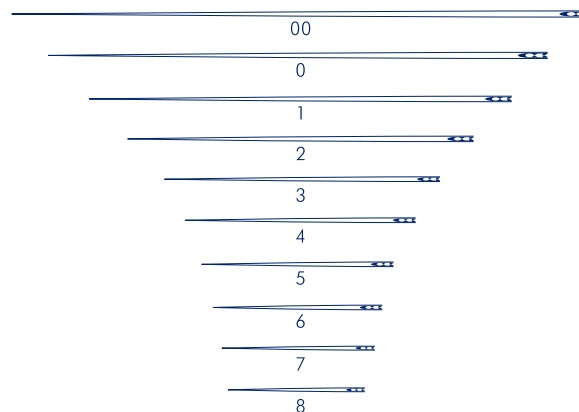

* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
PB	00	0,80	75
	0	0,80	65
	1	0,70	55
	2	0,70	45
	3	0,60	36
	4	0,60	30
	5	0,60	25
	6	0,60	22
	7	0,50	20
	8	0,50	18
	9	0,50	15
PB 001	10	0,50	12
	5	0,40	25
	6	0,40	22
	8	0,40	18
	9	0,40	16
PB 002	10	0,40	12
	1	0,70	50


Иглы хирургические для кишечного шва и обшивания

PA полуизогнутые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PA 532		

* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
PA	00	0,80	75
	0	0,80	65
	1	0,70	55
	2	0,70	45
	3	0,60	36
	4	0,60	30
	5	0,60	25
	6	0,60	22
	7	0,50	20
	8	0,50	18
	9	0,50	15
10	0,50	12	

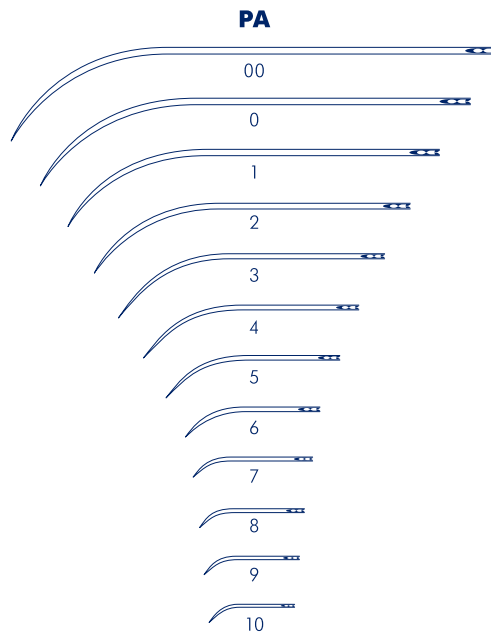


PD изогнутые 5/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PD 544		

* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
PD	00	0,80	75
	0	0,80	65
	1	0,70	55
	2	0,70	45
	3	0,60	36
	4	0,60	30
	5	0,60	25
	6	0,60	22
	7	0,50	20
	8	0,50	18
	9	0,50	15
10	0,50	12	

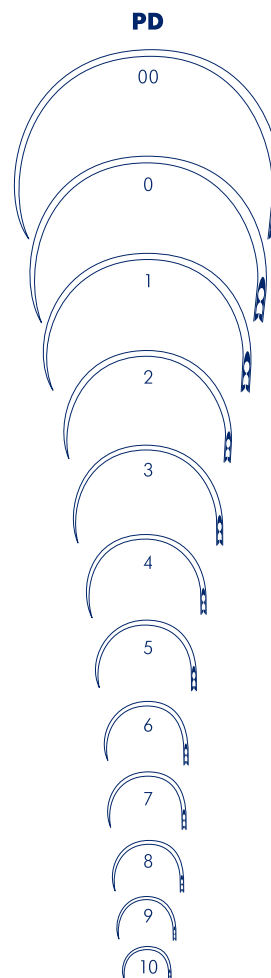

Иглы хирургические для глазного и сосудистого шва

OA полуизогнутые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
OA 550		

OB изогнутые 3/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
OB 552		

OG полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
OG 554		

KT изогнутые 3/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
KT 557		

PAC прямые






Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PAC 555		

PAG полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PAG 655		

NE прямые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
NE 574		

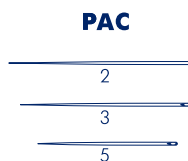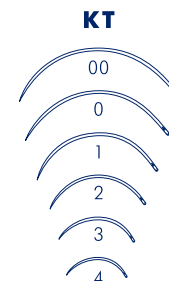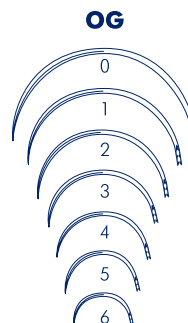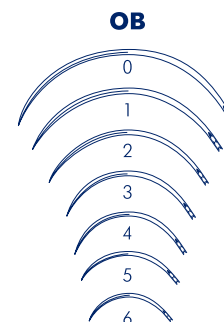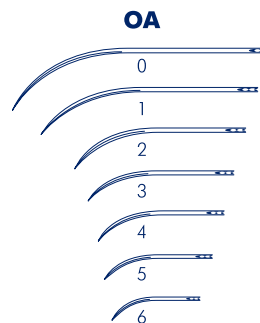


* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина	
OA	0	0,60	36	
	1	0,60	30	
	OB	2	0,50	25
		3	0,50	21
		4	0,50	18
		5	0,50	15
		6	0,50	12
OG		00	0,35	30
	0	0,35	25	
	1	0,35	22	
	2	0,35	18	
	3	0,35	16	
	4	0,35	12	
PAC	2	0,35	25	
	3	0,35	22	
	5	0,35	16	
	PAG	00	0,35	30
0		0,35	25	
1		0,35	22	
2		0,35	18	
3		0,35	16	
NE	1	0,70	23	

Анатомические хирургические иглы


PM/A полуизогнутые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PM/A 623		

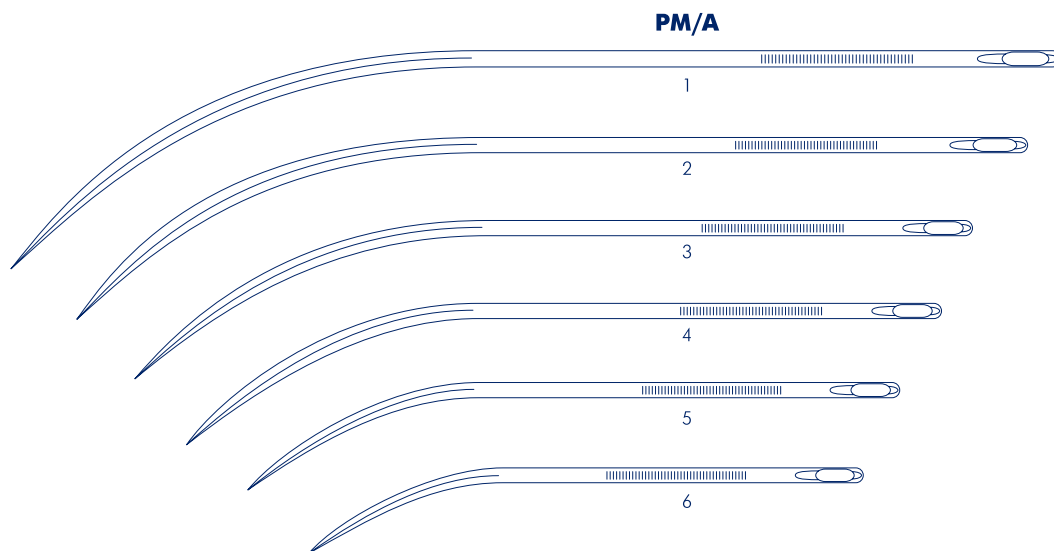

PM/S S-изогнутые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PM/S 627		

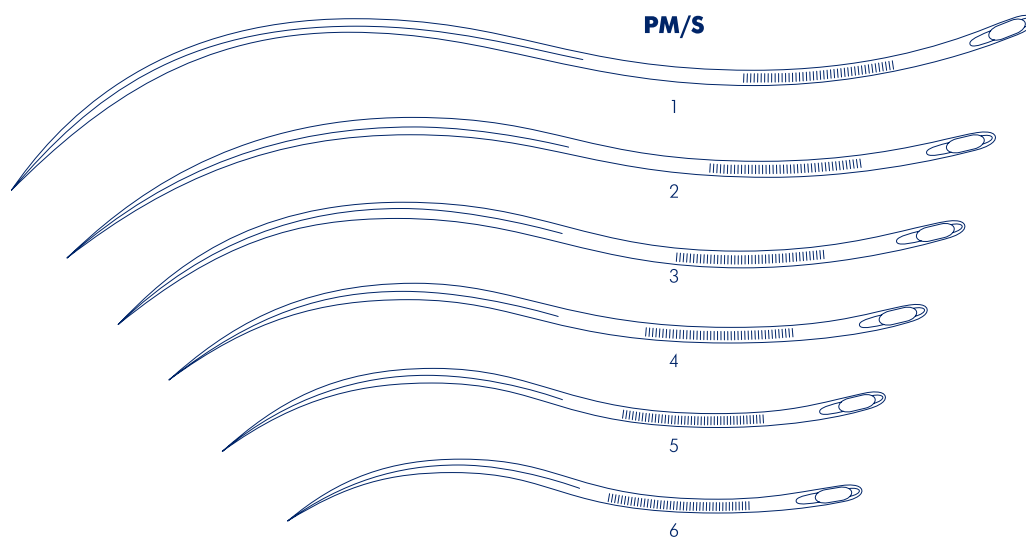

* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
PM/A	1	2,00	145
PM/S	2	2,00	130
	3	2,00	115
	4	2,00	100
	5	1,80	85
	6	1,80	75

Иглы хирургические **

BV полукруглые 3/8 окружности




Номенклатура	Ушко	Профиль острия
BV 580		

AV полуизогнутые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
AV 590		

PE полукруглые 2/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PE 002		

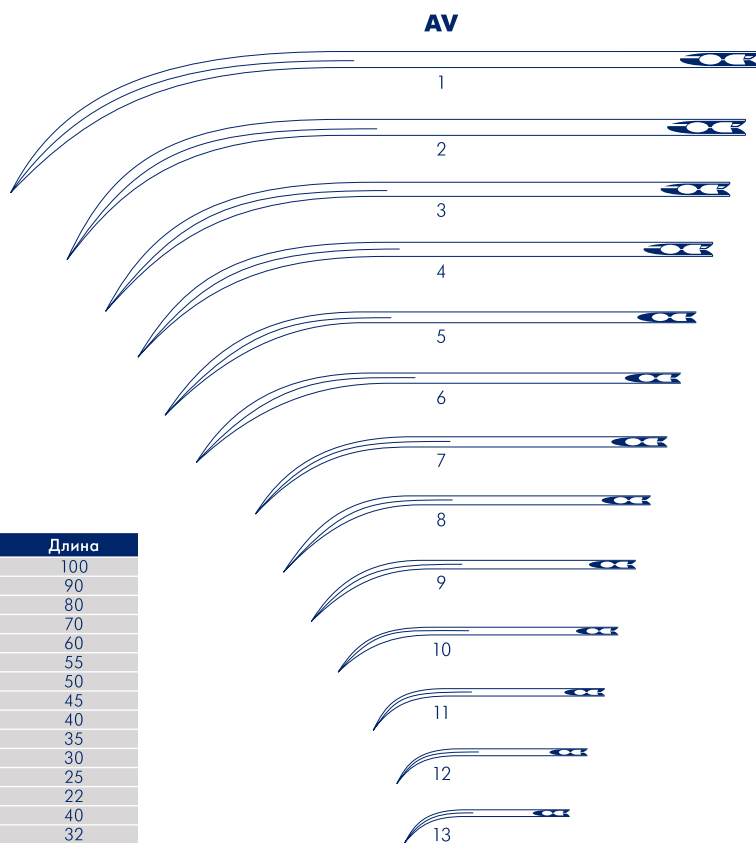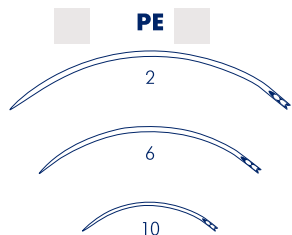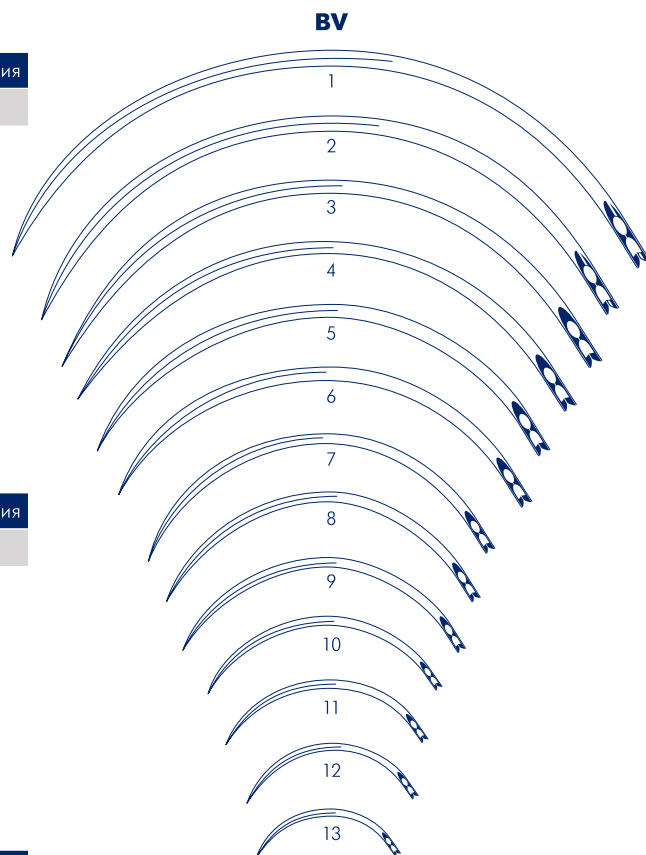

* размеры в мм
 ** могут применяться в ветеринарии

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
AV BV	1	2,00	100
	2	2,00	90
	3	1,80	80
	4	1,80	70
	5	1,60	60
	6	1,60	55
	7	1,50	50
	8	1,40	45
	9	1,30	40
	10	1,20	35
	11	1,10	30
	12	1,00	25
	13	0,90	22
PE 002	2	0,90	40
	6	0,80	32
	10	0,60	20