



Сеть магазинов  
профессиональной медтехники Деалмед

[www.dealmed.ru](http://www.dealmed.ru)

Воронеж: ул. Генерала Лизюкова, 74  
+7 (473) 300-36-95

Москва: м. Беляево, ул. Профсоюзная, 88/20 +7  
(495) 545-41-40

Санкт-Петербург: Мучной переулок, д. 3  
+7 (812) 407-11-71

Бесплатная горячая линия для регионов:  
8-800-555-57-88

# Серия iPM

## Монитор пациента



**Ваш надежный партнер  
при оказании неотложной помощи**



**mindray**  
healthcare within reach

## iPM 8/10/12

# Ваш надежный партнер при оказании неотложной помощи

Мониторы пациента серии iPM, в том числе iPM 8, iPM 10 и iPM 12, отвечают требованиям повседневной клинической практики, легко встраиваясь в рабочий процесс клиники. При неотложной помощи важно, чтобы монитор пациента был надежным и простым в использовании, обеспечивал возможности расширения с включением дополнительных параметров и позволял получить доступ к данным в любой момент и в любом месте. Монитор должно быть легко переносить, чтобы использовать его при транспортировке больного. Благодаря небольшому весу и модульной конструкции plug-and-play\*, мощным функциям и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, монитор пациента iPM наилучшим образом подходит для оказания неотложной помощи.



\* Plug-and-play — функция, позволяющая подключать дополнительные модули без выключения или перезагрузки монитора, не требующая обновления программного обеспечения или дополнительных настроек прибора.

## Гибкая модульная конструкция и комплексный мониторинг

Основной блок iPM позволяет проводить наиболее часто используемые измерения, включая ЭКГ, НИАД, SpO<sub>2</sub>, температуру и частоту дыхания. Благодаря модульной конструкции plug-and-play мониторов iPM к ним можно легко добавлять дополнительные функции мониторинга, например функции инвазивного измерения артериального давления (ИАД), сердечного выброса (СВ), EtCO<sub>2</sub> или мультигаз, в соответствии с конкретными клиническими потребностями.

Кроме того, модули измерения дополнительных параметров можно использовать для нескольких мониторов, что позволяет реализовывать гибкие и эффективные клинические решения.



EtCO<sub>2</sub> в боковом потоке + ИАД + СВ

Идеальное решение для мониторинга интубированных и неинтубированных пациентов в неотложной медицине, где необходимо проведение капнографии.



EtCO<sub>2</sub> в микропотоке + ИАД + СВ

Применимый для пациентов любого возраста, модуль был разработан специально для новорожденных.



EtCO<sub>2</sub> в основном потоке + ИАД + СВ

Не требует времени для разогрева, быстро выдает результат, высокоэффективен.



Мультигаз + ИАД + СВ

Самый маленький в мире модуль для анализа анестетиков. Идеальное решение для операционной.

## Профессиональные инструменты для анализа ЭКГ, разработанные специально для кардиологических отделений.



Мониторинг и интерпретация 12 отведений ЭКГ



Анализ ST-сегмента по шаблону




Анализ до 23 видов аритмий


## Измерение дополнительных параметров благодаря простой модернизации



До 4 каналов ИАД

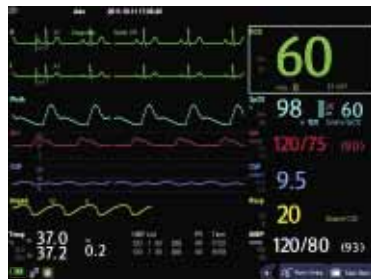

Мультигаз

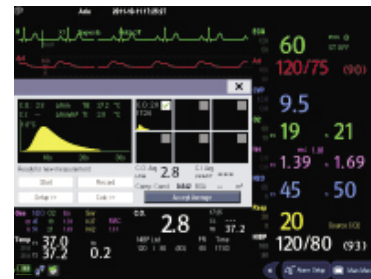

Измерение СВ

# Удобен в работе —

- Серия iPM разработана с целью удовлетворить широкий спектр потребностей медицинской практики. Параметры основного блока отвечают всем требованиям к стандартному мониторингу. Дополнительные модули позволяют расширить возможности мониторов серии iPM для удовлетворения потребностей неотложной медицины.
- Интуитивно понятный интерфейс мониторов iPM предусматривает единое меню для настройки сигналов тревог, крупный шрифт и функцию просмотра данных с других мониторов. Интерфейс с сенсорным экраном, поворотной ручкой и программируемыми клавишами быстрого доступа обеспечивает исключительное удобство при работе с мониторами серии iPM.

Индикатор тревоги с 360-градусным обзором.

Встроенные разъемы для ЭКГ, параметров дыхания, SpO<sub>2</sub>, неинвазивного измерения артериального давления и температуры. Все разъемы имеют цветовую маркировку, соответствующую маркировке принадлежностей.

Модули plug-and-play. Десять различных комбинаций дополнительных параметров: ИАД, СВ, EtCO<sub>2</sub> и мультигаз.



Крупный шрифт и настраиваемый интерфейс



Режим отображения OxyCRG для мониторинга новорожденных



Мини-тренды облегчают анализ тенденций изменения параметров

# прост в управлении

- Серия iPM позволяет реализовать широкий выбор вариантов крепления. Интегрированное быстроразъемное крепление обеспечивает удобную и быструю установку прибора для прикроватного мониторинга и его снятие для транспортировки.
- Встроенный в мониторы iPM принтер и функция автоматической записи эпизодов гарантируют сохранение данных мониторинга в полном объеме.



ЖК-дисплей высокого разрешения со светодиодной подсветкой и сенсорным экраном; диагональ 8, 10 и 12 дюймов.

Настраиваемые клавиши быстрого доступа, позволяющие быстро запускать часто используемые функции.

Интуитивно понятное и удобное управление монитором с помощью поворотного регулятора и кнопок.



Режим полного просмотра данных



Настройка сигналов тревоги на одном экране



Функции просмотра данных других пациентов и дистанционного управления сигналами тревоги

## Удобный и эргономичный дизайн

- Компактный и эргономичный дизайн позволяет легко устанавливать и снимать модуль даже одной рукой.



- Механизм крепления позволяет быстро, в одно касание, отсоединять монитор от настенного крепления или мобильного штатива для его транспортировки.




- Индикатор тревоги с 360-градусным обзором позволяет безопасно мониторить состояние пациента. Индикатор тревоги, расположенный на верхней панели, заметен под любым углом обзора и, следовательно, позволяет врачу оперативно реагировать при развитии критических ситуаций.



- Крючок для крепления на прикроватной рейке, встроенный в ручку монитора, позволяет устанавливать его быстро и надежно.



# Оптимизированные возможности подключения — усовершенствованный обмен информацией

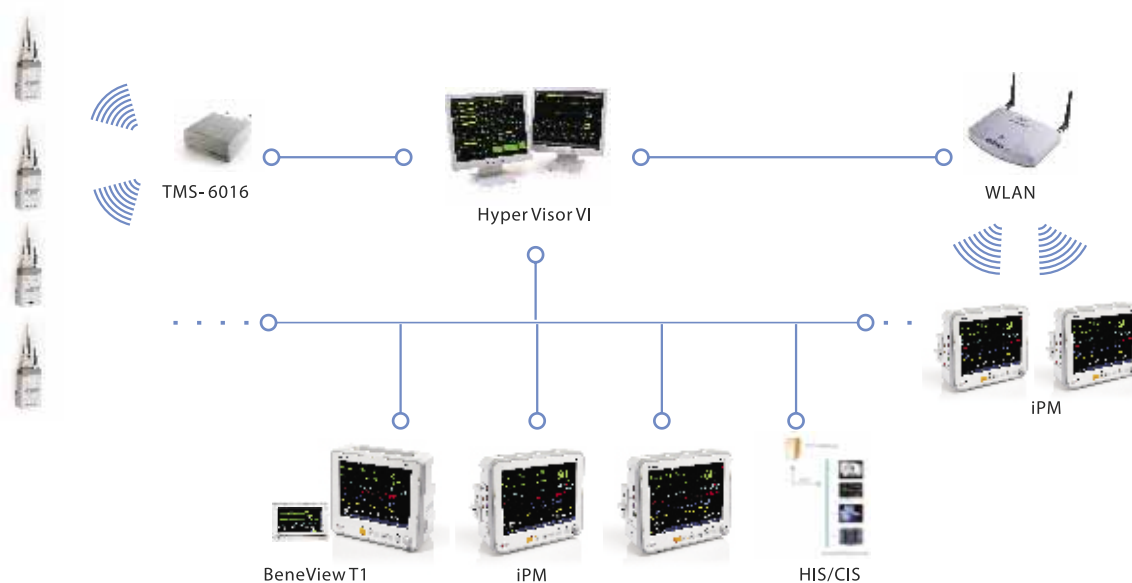

Пример структуры информационной сети больницы

- Мониторы iPM можно подключать к центральной станции мониторинга и eGateway как через проводную, так и через беспроводную сеть.
- С помощью протокола HL7 монитор iPM может быть подключен к больничной информационной системе (HIS). Это решение позволяет усовершенствовать информационные потоки и исключить риск ошибок, связанных с вводом данных.
- Встроенная в монитор iPM функция просмотра данных других пациентов позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией между прикроватными мониторами. Одновременно можно просматривать данные до 10 мониторов. Это помогает создать эффективное сетевое решение даже в отсутствие центральной станции мониторинга.
- Реализованная в мониторе iPM возможность подключения к мобильному монитору BeneView T1 производства компании Mindray упрощает транспортировку пациента без потери данных. Это решение гарантирует постоянное наблюдение за пациентом и целостность данных; не требуется дополнительной калибровки или настройки, что повышает эффективность работы.
- Монитор iPM сохраняет до 48 часов записи волновых кривых в режиме полного просмотра, и 120 часов графических и табличных трендов. Это позволяет врачу проводить более раннюю и более точную диагностику.

# Серия iPM

## Монитор пациента

Материалы и информация, представленные в брошюре, распространяются в различных странах, но не все описываемые в ней товары и услуги обязательно будут доступны в вашей стране или регионе. Чтобы убедиться в наличии соответствующих изделий или услуг, обращайтесь в местный офис или к торговому агенту.

### Mindray Medical Netherlands B.V.

Drs.W.van Royenstraat 8, P.O. Box 26 3870 CA Hoevelaken,  
The Netherlands  
Тел.: (31-33) 254-4911  
Факс: (31-33) 253-4280

### Mindray Medical Italy S.r.l.

ViaGirardo Patecchio, 420141 Milano Italy  
Тел.: (39-02) 57-402-444  
Факс: (39-02) 5523-2018

### Mindray Medical España S.L.

Avenida Manoteras 38, Edificio B, Bajo B008. 28050-Madrid Spain  
Тел.: (34-91) 392 3754  
Факс: (34-91) 392 3756

### Mindray Medical Germany GmbH

Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim, Germany  
Тел.: (49) 6251-17524-0  
Факс: (49) 6251-17524-20

### Mindray (UK) Limited

3 Percy Road, St Johns Park, Huntingdon, Cambs, PE29 6SZ  
United Kingdom  
Тел.: (44) 1480 416 840  
Факс: (44) 1480 436 588

### Mindray Medical France SARL

Europarc Cretell 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, France  
Тел.: (33-1) 4513-9145  
Факс: (33-1) 4513-9151

### Mindray Medical Rus Co.Ltd

ул. 2-я Звенигородская, 13, стр. 41, 123022, Москва, Россия  
Тел.: (7-499) 553-6036  
Факс: (7-499) 553-6039  
Горячая линия: 8-800-333-5323

### Mindray Medical Colombia S.A.S.

Room No.702,Torre UNIKA, Carrera 9 No.77-67, Bogota, Colombia  
Тел.: (57-1) 3130892 / 3210916

### Mindray do Brasil — Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.

Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo — SP, CEP 05012-020  
Тел.: (55 11) 3124-8026

### Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.

Félix Parra # 175 Colonia, San José Insurgentes Sur  
Delegación Benito Juárez 03900 México, D. F.  
Тел.: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620  
Факс: (52) 55 56 62 65 97

### PT.Mindray Medical Indonesia

Menara Dea 1,Suite 301,Kav.E4 No.3/1, Mega Kuningan,  
Jakarta Selatan 12950  
Тел.: +6221 5762650  
Факс:+ 6221 5762655

### Mindray Medical Egypt

Ground Floor, 11 El Imam Metwally El Sharawi Street, Sheraton  
Heliopolis — El Nozha, Cairo, Egypt  
Тел.: +2 02 22691047  
Факс:+2 02 22691046

### Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)

401/402, NDM-1, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Center,  
New Delhi-110034  
Тел.: +91 11 4923 0000  
Факс: +91 11 4923 0030  
Бесплатный номер: 1800 10 20 300

### Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)


B-404,City Point,Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai,  
400 059, India  
Тел.: (91-22) 4020-0000  
Факс: (91-22) 4020-0011

### Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.

Yenibosna, Köyaltı Mevkii,29 Ekim Cad. Kuyumcukent 2 Nolu Plaza  
Kat:2 Daire:1, Yenibosna, Istanbul, Turkey  
Тел.: (90-212) 482 08 77  
Факс:(90-212) 482 08 78

### Mindray Medical Thailand Limited

Thai Summit Tower Co., Ltd., No. 1768, New Phetchaburi Road, Bang  
Kapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok

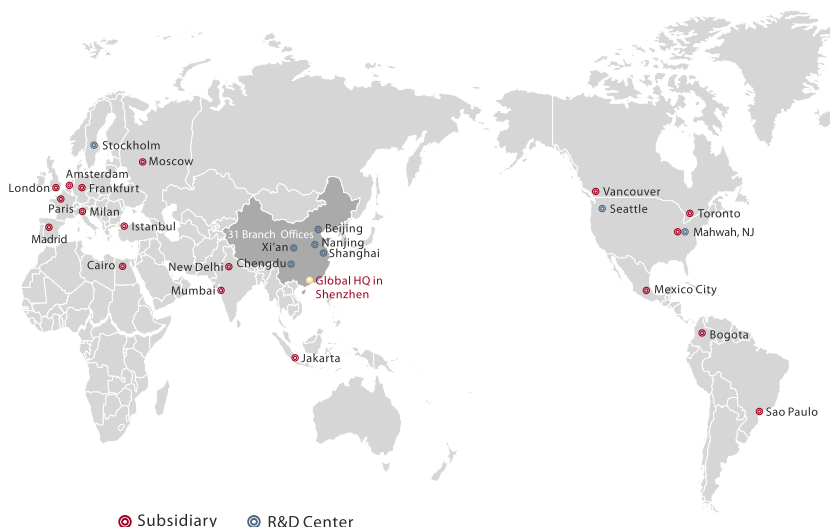

● Subsidiary ● R&D Center



Сеть магазинов  
профессиональной медтехники Деалмед

[www.dealmed.ru](http://www.dealmed.ru)

Воронеж: ул. Генерала Лизюкова, 74  
+7 (473) 300-36-95

Москва: м. Беляево, ул. Профсоюзная, 88/20 +7  
(495) 545-41-40

Санкт-Петербург: Мучной переулок, д. 3  
+7 (812) 407-11-71

Бесплатная горячая линия для регионов:  
8-800-555-57-88

# mindray

Компания Mindray обозначается  
на Нью-Йоркской фондовой бирже символами «MR»  
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,  
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China  
Тел.: +86 755 26582888. Факс: +86 755 26582680  
Электронная почта: [intl-market@mindray.com](mailto:intl-market@mindray.com)  
Веб-сайт: [www.mindray.com](http://www.mindray.com)



Mindray — товарный знак компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.  
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
© Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, 2010–2011 гг. Все права защищены.  
Номер документа: ENG-IPM Series-210X285x4P-20111130